

Bogotá D.C, Enero 27 del 2016

JM – MD – P02 – F01

Señores

**PRODIAGNOSTICO CLINICA DEL NORTE**
**Atn:Ing. Juan Pablo Rendon**

Medellin

**REFERENCIA: COJ-IC-0108-2016**

Respetados señores:

En atención a su amable solicitud, nos permitimos a continuación cotizar los siguientes repuestos según diagnostico DX260116-03:

**EQUIPO: VIDEOGASTROSCOPIO**

MARCA: FUJIFILM

MODELO: EG-530FP

SERIAL: 4G314A029

Se realiza Pruebas de fugas con resultado negativo (Ver Foto N°.1) desarme parcial del equipo e inspección general encontrando:

- Desajuste interno del conector de video a las tarjeta de video.
- Tapa de punta distal fracturada por impacto (Ver Foto N.2).
- Sistema de angulación desajustado por uso normal.

A partir de este momento no se descarta defectos en la imagen de la videocámara, como consecuencia de impactos en la punta distal. Se pueden presentar casos como: Manchas, empañamiento, rayas, círculo negro, interferencia y/o corto circuito.

	DESCRIPCION	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CAP - TAPA PUNTA DISTAL	FUJIFILM	\$ 251.600	\$ 251.600
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ESPECIALIZADA	ESPECIALIZADA	CORTESIA
1	MANO DE OBRA	ESPECIALIZADA	\$ 350.000	CUBIERTA POR EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO
<b>SUBTOTAL</b>				<b>251.600</b>
<b>I.V.A</b>				40.256
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>291.856</b>

**EL TIEMPO DE PERMANENCIA DEL EQUIPO EN NUESTRO LABORATORIO SIN APROBACION DE REPARACION DEL CLIENTE ES DE 2(DOS) MESES, DESPUES DE ESTE TIEMPO SI NO SE RECIBE DICHA APROBACION EL EQUIPO SERA DEVUELTO.**

Oficina Principal. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124 - 25 • PBX: 57 (1) 637 5177 • Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782 - 629 8746 - 629 5943  
629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedical.com

Sede Medellín: Calle 7 No. 39 - 107 • Teléfono: 232 7410 • Edificio Médico, Of. 212

**CONDICIONES COMERCIALES**

<b>FORMA DE PAGO:</b>	<b>CONTADO (Consignación AV VILLAS CTA AHORROS 019168822 Jomedical .)</b>
<b>MONEDA DE NEGOCIACION</b>	PESOS COLOMBIANOS
<b>TIEMPO DE ENTREGA:</b>	4 DIAS HABILES DESPUES DE GENERADA LA ORDEN DE COMPRA
<b>VALIDEZ DE LA OFERTA:</b>	A ENERO 30 DE 2016
<b>GARANTIA</b>	90 DIAS BAJO LA MISMA FALLA REPARADA

Cualquier inquietud será suministrada con gusto por nuestro Departamento de Servicio al cliente: **TEL 6375177 EXT 201-202 o 2152295 CEL 310-2454506**

Cordialmente



**NATALIA MACHADO VEGA**  
Gerente General



**ANA JULIA LOPERA**  
Coordinadora Servicio al Cliente

Elaboró: AnaMaria L.

Oficina Principal. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124 - 25 • PBX: 57 (1) 637 5177 • Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782 - 629 8746 - 629 5943  
629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedical.com

Sede Medellín: Calle 7 No. 39 - 107 • Teléfono: 232 7410 • Edificio Médico, Of. 212

Bogotá, 26 de Enero de 2016

**JM-IG-P01/F08**  
Versión 4.0

Señores  
**PRODIAGNOSTICO CLINICA DEL NORTE**  
Medellín.

DIAGNOSTICO DE EQUIPO No. DX260116-03

Respetados Señores:

El siguiente diagnóstico técnico corresponde al equipo descrito a continuación:

<b>Equipo</b>	VIDEOGASTROSCOPIO
<b>Marca</b>	FUJIFILM
<b>Modelo</b>	EG530FP
<b>Serial</b>	4G314A029
<b>Accesorios</b>	Tapa Set-up y Maletín de transporte EC530FL.

**Falla reportada:** La Auxiliar Beatriz Sánchez reportó que el equipo presenta “pantalla mala, no da imagen”.

**Pre-inspección:** En visita realizada por nuestra Ingeniera Alexandra Cardoso se evidenció que el equipo presenta encendido en stand by, desajuste de angulaciones, tapa distal fracturada y tubo de inserción con hendidura en el centímetro 73.

**Diagnóstico:** Se realiza Pruebas de fugas con resultado negativo (Ver Foto N°.1) desarme parcial del equipo e inspección general encontrando:

- Desajuste interno del conector de video a las tarjeta de video.
- Tapa de punta distal fracturada por impacto (Ver Foto N.2).
- Sistema de angulación desajustado por uso normal:

A partir de este momento no se descarta defectos en la imagen de la videocámara, como consecuencia de impactos en la punta distal. Se pueden presentar casos como: Manchas, empañamiento, rayas, círculo negro, interferencia y/o corto circuito.

1136 Cd  
26 ENE 2016

Oficina Principal. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124 - 25 • PBX: 57 (1) 637 5177 • Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782 - 629 8746 - 629 5943  
629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedical.com

Sede Medellín: Calle 7 No. 39 - 107 • Teléfono: 232 7410 • Edificio Médico, Of. 212

### IMÁGENES DE ENTRADA

FOTO No. 1  
Prueba de Fugas

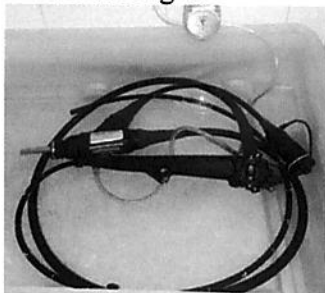


FOTO No. 2  
Punta Distal Rota

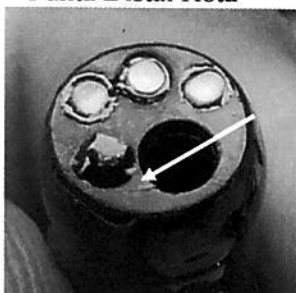


FOTO No. 3  
Imagen Actual



### Trabajo a realizar:

Cambio de la tapa distal y desarme parcial del equipo para el mantenimiento correctivo del conector de video y ajuste del sistema de angulaciones.

### Repuestos a reemplazar:

Tapa de Punta Distal - CAP (Fracturado)
Mantenimiento correctivo al conector de video

Tiempo estimado de reparación: 4 días hábiles.

Cualquier inquietud puede comunicarse a Servicio al Cliente a los Números 310 2454506.

Cordialmente;  
Realizado por:

Breyner Godoy  
Laboratorio de Endoscopia

Revisado por:

Leonardo Riaño  
Laboratorio de Endoscopia

26 ENE 2016

Oficina Principal. Bogotá, D.C. Carrera 7 No. 124 - 25 • PBX: 57 (1) 637 5177 • Tels: 637 1857 - 629 5914 - 629 8782 - 629 8746 - 629 5943  
629 5944 - 629 8784 - 629 6430 - 637 1865 • Fax: 629 5958 • E-mail: jomedical@jomedical.com

Sede Medellín: Calle 7 No. 39 - 107 • Teléfono: 232 7410 • Edificio Médico, Of. 212